

**NEW!**  
**PRO-FLEX<sup>®</sup> ST**  
Be flexible

Pro-Flex STは、日常生活において柔軟性と同時に信頼性を求める低活動から高活動のユーザー向けに設計されています。この多用途の義足は、滑らかな踏み返しとコントロールされた蹴り出しを提供します。

Pro-Flex STは、動力学と地面への順応性を組み合わせた多機能設計によって、さまざまな地形の上での歩行を容易にします。すべてのPro-Flexデバイスと同様に、効果的な全長トウレバーと解剖学的なスプリット・トウを備えた独自の3枚ブレード設計が特徴です。

Pro-Flex STは、従来のエネルギー蓄積返還型足部よりも、踵の接地から爪先離地まで滑らかに自然な歩行を実現します。スマートな形状を備えた、外観の美しい解剖学的フットカバー、そして一体化したオスピラミッドが付いています。Pro-Flex STは、塩素や塩水のいずれに浸かっても完全に耐性をもつ防水性能があります。



**製品特徴**

- アクティブな脛骨の前進
- 解剖学的な足部
- 全長トウレバー
- 加わる負荷に比例した反応
- サンドル・トウ
- スプリット・トウ
- 防水

足部情報	
カテゴリ	1-9
サイズ	22-30
足部重量 (サイズ 27)	756g (フットカバーとソックスを含む)
構造の高さ (サイズ 27)	160mm (オスピラミッドとフットカバーを含む)
ヒール高	10mm
アダプタオプション	オスピラミッド
保証期間	36ヶ月


ユーザー情報	
切断レベル	大腿切断, 下腿切断
衝撃レベル	低~高
体重制限	166kg

## カテゴリ選択表

体重 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
<b>低衝撃カテゴリ</b>										
サイズ 22-24	1	1	2	3	4	5	6	該当なし	該当なし	該当なし
サイズ 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
サイズ 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>中衝撃カテゴリ</b>										
サイズ 22-24	1	2	3	4	5	6	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
サイズ 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	該当なし
サイズ 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	該当なし
<b>高衝撃カテゴリ</b>										
サイズ 22-24	2	3	4	5	6	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
サイズ 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	該当なし	該当なし
サイズ 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	該当なし	該当なし


## キット

### PRO-FLEX ST オスピラミッド付

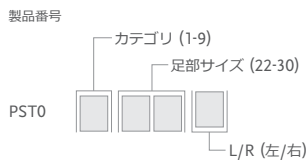

#### 構成:

- フットモジュール
- 取り外し可能フットカバースペクトラソックス付

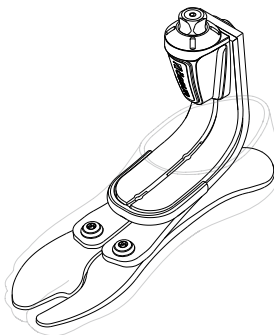

WWW.OSSUR.JP

Össur Japan G.K.  
〒136-0071  
東京都江東区亀戸2-27-7  
FORECAST亀戸8階

TEL 03 5609 7797  
FAX 03 6745 9528  
info\_japan@ossur.com

