



取り付けに適した靴



ソールが硬く、地面に向かって広がっている。もしくは、ソールにひっかかる形状。

紐タイプのスニーカー  
(紐通し穴が縦に6個以上)



安定感のある靴で、生地がしっかりしている。



かかとがしっかりしている

### 装着例



#### 紐タイプのスニーカー

紐穴がたくさんあり、生地やソールが厚くもともと装着しやすい靴



#### ビジネスシューズ

革靴で紐穴が少ないタイプは、靴に加工をして装着しやすい靴



#### サンダル

クリップ装着部に厚手のストラップがあれば、ストラップにクリップを取り付けて装着



#### 登山靴・ブーツなど

ハイカットの靴でも背部の支柱が邪魔せず装着可能

### オプション



伸展ストッパーキット 各4,840円(税込)

	30mm	40mm	45mm
品番	13040209	13040210	13040211



アングルストラップ  
3,300円(税込)

品番	13040207
----	----------



ヒールバンパーキット  
1,320円(税込)

品番	13040212
----	----------

### 交換用部品



レースクリップ(2個) 各935円(税込)

	P	S	M/L
品番	13040112	13040111	13040110

カフストラップ・クッションセット



クラシック用 4,290円(税込)

	P	S/M/L
品番	13040121	13040123

サミット用 5,720円(税込)

	S	M/L
品番	13040214	13040213

フロティア用 6,270円(税込)

	S/M/L
品番	13040215

MEMO

**k** パシフィックサプライ株式会社

●大東本社 TEL.072-875-8008 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

※価格は、消費税込みの価格を表記しています。

2023.6.MC110.500.PAC

カタログ品番: 36010200

**Pacific Supply**  
Think Possibility

靴のつま先を持ち上げて、  
歩行や運動をサポート!



**Turbo Med™**



特許出願中



# もっと体を動かしたい…。子供たちと一緒に走りたい…。そんな思いをかなえてみませんか？

対象  
下垂足


スニーカーに簡単に取り付けができ、靴のつま先を持ち上げた状態で保持します。体重がかかる踵や足裏には直接ふれる部分がなく、肌にやさしい歩行補助具です。また、足首を固定するベルトもないため、動きを制限することはありません。毎日の通勤通学やペットのお散歩、ジョギングやハイキングなどの軽い運動からマラソン・登山などの本格的なスポーツまで、様々な場面での健康維持に貢献します。



Web



Facebook

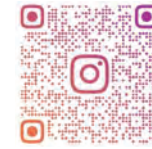

Instagram



- 従来の「エクスターン」が「エクスターンクラシック」に変更
- 靴もつま先を持ち上げ、保持することで歩行や日常生活でのサポート  
⇒凹凸のある地面や方向転換でも制限しません
- 小児の成長に対応したPEDI（ペディ）サイズ  
⇒小児用はクラシックのみです

19,800円(税込)

製品名	エクスターンクラシック			
品番	13040004	13040007	13040006	13040005
サイズ	P	S	M	L
靴のサイズ(★)	約17.0cm 22.0cm	約20.5cm 26.0cm	約25.5cm 28.5cm	約28.5cm 34.0cm
重量	約190g	約290g	約310g	約320g
材質	熱可塑性エラストマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、グラスファイバー、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン			

★靴のサイズは目安です。靴の形状によって異なる場合があります。



- 通常のエクスターンと比較し強度の向上、全てにおいてより高いパフォーマンス、耐久性を発揮します。  
⇒従来と比較し、よりアクティブな方を対象
- プラスチックとカーボンにより、従来のX-TERNに比べ25%の軽量化。  
⇒長時間の運動において負担軽減
- 背屈補助力18%増加、内外反強度35%増加しています。  
⇒広可動域の補助、強度向上

33,000円(税込)

製品名	エクスターンサミット		
品番	13041001	13041002	13041003
サイズ	S	M	L
靴のサイズ(★)	約20.5cm 26.0cm	約25.5cm 29.5cm	約29.0cm 34.0cm
重量	約220g	約240g	約250g
材質	熱可塑性エラストマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、グラスファイバー、カーボンファイバー、グラファイト、LCPAポリマー、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン		

★靴のサイズは目安です。靴の形状によって異なる場合があります。



- 通常のXternの着脱が困難な方向向けに前カフになり、着脱が簡単になりました。  
⇒従来のターボメドと比べ装着しやすくなりました
- 新型のマグネット式アタッチメントを採用しています。  
⇒リハビリ・在宅での現場において装着が容易です
- マジックテープとマグネットロックのベルトは片手で簡単に装着できます。  
⇒片麻痺の方でも脱着がしやすくなりました

28,600円(税込)

製品名	エクスターンフロンティア		
品番	13041011	13041012	13041013
サイズ	S	M	L
靴のサイズ(★)	約20.5cm 26.0cm	約25.5cm 28.5cm	約28.5cm 34.0cm
重量	約250g	約270g	約280g
材質	熱可塑性エラストマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、グラスファイバー、LCPAポリマー、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン		

★靴のサイズは目安です。靴の形状によって異なる場合があります。