

Guldmann™

耐久性・安全性に優れたスロープ



車いす用スロープ



※画像はイメージです

テレスコピックスロープ

デモ機あり

耐久性・安全性抜群です

- アルミの一体成型で横ブレに対し非常に安定しています。
- 本体パンチング加工により軽量化されました。
- スライド式で使用場面により長さを調整できます。
- ハンドルを折りたたむことができます。
- 収納時には最短長にてロックできます。


品番	18440005
品名	テレスコピックスロープ 282cm 3段式
サイズ	282
使用範囲	116~282cm
重量	1本: 8.2kg / 1組: 16.4kg
耐荷重	1本: 125kg / 1組: 250kg
スライド箇所数	2
スロープ内側	17cm
スロープ外側	23.5cm
価格	¥190,000 (税抜)
JAN	4524491007424
TAIS	01087-000060
品番	18440004
品名	テレスコピックスロープ 193cm 3段式
サイズ	193
使用範囲	87~193cm
重量	1本: 6.5kg / 1組: 13kg
耐荷重	1本: 150kg / 1組: 300kg
スライド箇所数	2
スロープ内側	17cm
スロープ外側	23.5cm
価格	¥170,000 (税抜)
JAN	4524491007417
TAIS	01087-000059

特徴

アルマイト加工された一体成型のアルミニウム製です。パンチング加工により軽量化されました。




スライド防止ロック
開閉式のロック機構により持ち運び時のスライドを防止します。

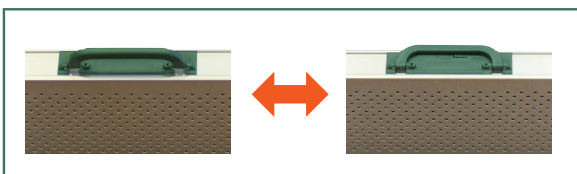

移動時などに持ち運びやすい折りたたみ式のハンドル。

すべりにくい表面加工により、砂や雪に対してもグリップ力を損ないません。

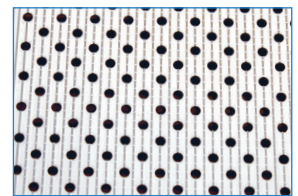

ナイロン製ガイドレールで安定性があり砂が入らない構造になっています。

デモ機あり


貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

イージーフォールド・プロ

折りたたんでコンパクトに収納できます。


- 公共施設や店舗の入口など同じ場所で使用する場合は、車から車椅子を乗り降りさせるのに最適です。
- 十分な強度と安定性を考慮した設計。
スクーターや電動車椅子にも利用できます。
- 使用しない場合は、折りたたむので、収納スペースをとりません。
- 本体：アルミ製ハニカム構造
- 外寸：77.6cm/内寸：76cm/エッジ高：4.4cm
折畳時幅：40.3cm/折畳時高さ：8.5cm

品番	26260103
品名	150
長さ	148.5cm
重量	11.4kg
耐荷重	350kg
価格	¥220,000 (税抜)
JAN	4524491004881
TAIS	01087-000039

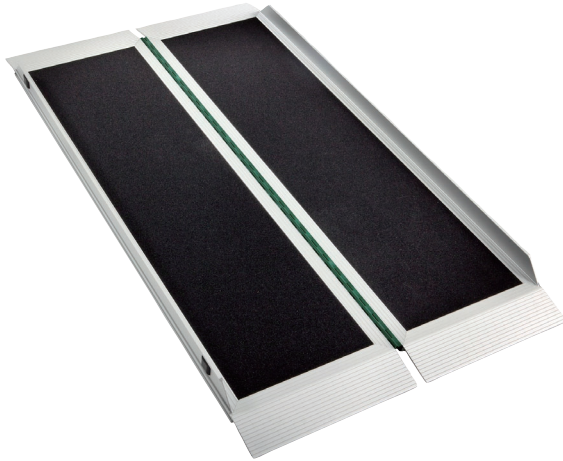

折りたたみイメージ

使用しない場合は折りたためます。

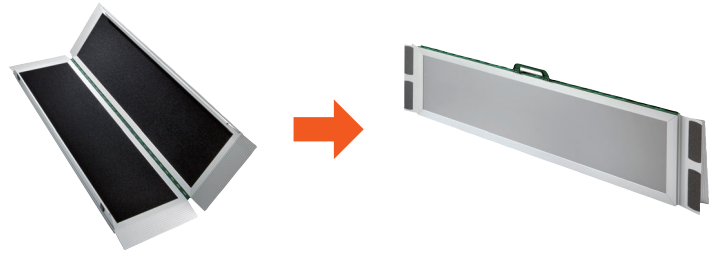



ステップレス・敷居用スロープ

デモ機あり

ドアの敷居用スロープです。


- ドアの敷居をまたぐように設置できます。
- 置くだけで使用可能で、不要な際は邪魔になりません。
- 緩やかな角度で安心して上り下りできます。
- 電動スクーターや電動車椅子での利用に十分な強度と安定性があります。
- アルミ製で公共施設や店舗入り口など屋内外を問わず使用可能です。

品番	26260201	26260202
品名	67cm幅	77cm幅
長さ	67×60×2.5cm	77×60×2.5cm
重量	3.4kg	4.3kg
耐荷重	350kg	350kg
価格	¥47,000 (税抜)	¥47,000 (税抜)
JAN	4524491004898	4524491004904
TAIS	01087-000045	01087-000046

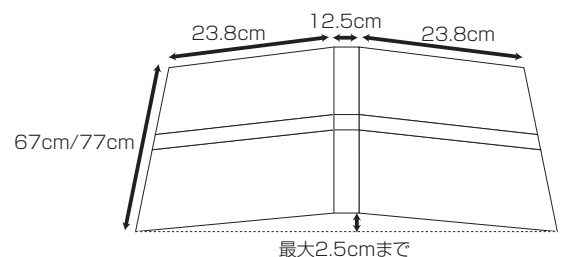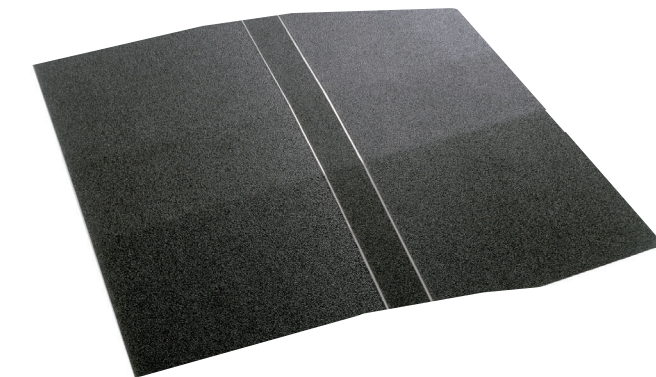

●最適なスロープの長さの選び方


- 一番長い状態で使用する場面を想定してスロープをお選びください。
- スロープが長ければ長いほど、勾配が緩やかになります。
- 使用しない場合は、コンパクトに収納でき、スペースをとりません。

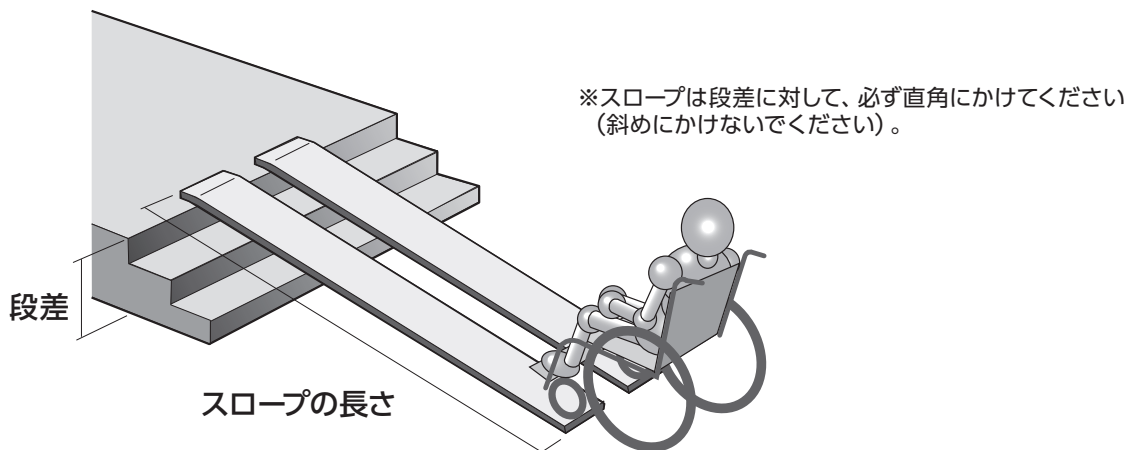

●介助者が手動車椅子を押しながら上る場合

段差：スロープの長さ=1：6（勾配約10°）を目安に。

（例）段差が20cmの場合→段差20cm×6=120cm（スロープの長さ）

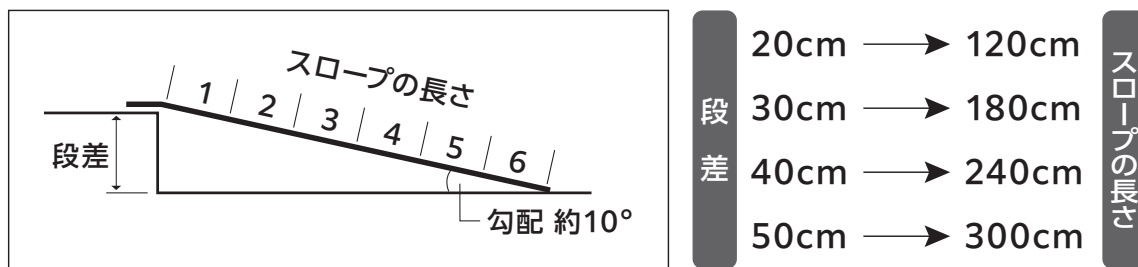

※安全な使用角度は搭乗者の体格・体幹バランス・介助者の体力・車椅子の機能・設置場所などによって異なります。

k パシフィックサプライ株式会社

- 本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9
- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp>

パシフィックサプライ 検索

販売店名

※最新情報は弊社ホームページをご覧ください。
※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。