

# 洗える座クッション サポーション



しっかり座れて清潔で快適なクッション

清潔

丸洗いできて  
清潔



※カバーと中身は別々に  
洗濯してください


快適

クッション材が空気を  
通すポリエステル繊維  
だからムレにくい



姿勢

姿勢安定性と活動を  
備え持つ特殊な  
サポート形状

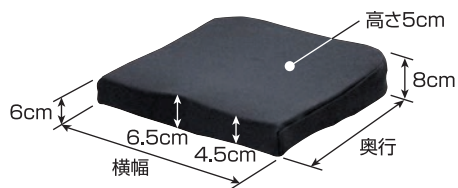

洗える座クッション サポーション

¥13,500(税込)

| 品番    | 42251002 | 42251003 | 42251004 |
|-------|----------|----------|----------|
| サイズ   | S        | M        | L        |
| 横幅×奥行 | 37×38cm  | 41×40cm  | 45×42cm  |

| S          | M          | L          |
|------------|------------|------------|
| 重量<br>520g | 重量<br>600g | 重量<br>680g |

\*追加カバーのみ(S:¥5,460/M:¥5,676/L:¥6,108)(税込)

医療法人 誠佑記念病院  
リハビリテーション室室長 理学療法士  
北出 貴則 氏

推薦  
ポイント

姿勢安定性と動きやすさを備え持つ「洗える座クッション サポーション」。日常生活の様々な場面で車椅子ユーザーの姿勢安定性と活動性の拡大に繋がるものと考えます。

# 車椅子自走のしやすさも考えた 車椅子クッション

表面クッション



ベースクッション



サポート(支え)と  
モーション(動き)の  
両方を兼ね備えた  
クッションです。

## ベースクッション

### 船底形状

車椅子の座シートのたわみに対応し、クッションの性能を発揮します。

### 骨盤後方下部サポート

後傾しようとする骨盤を後方下部からサポートすることで、骨盤の後傾を防ぎ姿勢が安定します。活動姿勢の際も骨盤後方下部サポートと適切なアンカーサポートで動きをサポートします。

### 大腿部の波型形状

大腿部の内転、外転を防ぎ安定性を高めます。

### 大腿部前方の前下がり形状

座位で活動的な姿勢をとる際は大腿部の前方へ重心が移ります。クッション大腿部前方を少し前下がりにする事で、重心移動がスムーズに行え、活動姿勢がとりやすくなります。又、下肢駆動も行いやすくなります。

### アンカーサポート

骨盤の前すべりを防ぎます。

## クッション材の特徴

テイジンの V-Lap® クッション材を採用。

タテ繊維配向の構造体からなる、繊維クッション材です。従来の硬綿よりもウレタンに近いクッション材で、クッション性・体圧分散性に優れています。環境にやさしく、リサイクルも可能です。

### お手入れ方法

カバーとクッション材は別々にし、洗濯機の弱水流(ネット使用)または手洗い(押し洗い)が可能です(液温は40℃を限界とし、中性洗剤をご使用ください)。洗濯後は手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞り陰干ししてください。

※塩素系漂白剤による漂白は出来ません。

※アイロンは使えません。

※ドライクリーニングは出来ません。

#### 材質

クッション材 ポリエステル100%

カバー(表) ポリエステル100% (裏) 塩ビレザー

\*最新情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.p-supply.co.jp/products/index.php?act=detail&pid=578>



## k パシフィックサプライ株式会社

●大東本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010  
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016  
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

●札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805  
●仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821  
●東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016  
●名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697  
●大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015  
●広島営業所 TEL.082-535-8300 FAX.082-535-8301  
●福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444